

voco

HIGHLIGHTS

Composite de alto rendimiento

GrandioSO Unlimited –
composite universal de 4 mm
en 5 Cluster Shades

Vital y adecuado para el uso diario

Preservación de la vitalidad y recubrimiento
de la pulpa con el biomaterial MTA vpt
(terapia de la pulpa vital)

Sabroso

Profluorid Varnish+ BioMin con
biovidrio es la nueva fuerza para
endurecer el esmalte dental

Hace que todos los deseos
se hagan realidad

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Composite universal de 4 mm en 5 Cluster Shades

Mientras que los composites universales estéticos requieren el costoso trabajo de estratificar y polimerizar en incrementos de 2 mm, los composites para restauración en bloque ofrecen la ventaja de poder aplicar incrementos de hasta 4 mm en la cavidad. Sin embargo, los composites en bloque (bulk-fill) a menudo sólo se utilizan para los dientes posteriores debido a una estética inadecuada. VOCO elimina ahora esta restricción con GrandioSO Unlimited. El material estético puede aplicarse en la cavidad en incrementos de hasta 4 mm y está indicado tanto para el área anterior como posterior. ¡Solo necesitará un composite universal condensable!

Sistema Cluster Shade

Además, con sólo 5 tonos, estará en una posición óptima para su práctica diaria y podrá racionalizar significativamente su almacén. Porque, gracias al sistema de color simplificado, es posible cubrir los 16 tonos de la escala VITA® classical con sólo 5 Cluster Shades.

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5					A4	
	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4
VITA® classical																

Composite de alto rendimiento

Con un impresionante contenido de relleno del 91 %, GrandioSO Unlimited sienta nuevas bases en cuanto a estabilidad y resistencia. La contracción de volumen del 1,44 % reduce, además, el peligro de formación de fisuras marginales y coloraciones marginales y contribuye a lograr obturaciones de alta calidad.



Kit de prueba

10 × 0,3 grs. Caps
(de cada 2 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ tarjeta cromática

REF 6257

Ahorre
hasta un
20%*

Jeringa Set

5 × 4,5 grs. jeringa
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ tarjeta cromática

REF 6258

Caps Set

75 × 0,3 grs. Caps
(de cada 15 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ tarjeta cromática

REF 6270

Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental

El composite de alto rendimiento

Universal

para el área de dientes
anteriores y posteriores

La mayor estabilidad

contenido de relleno del 91 %

5 "Cluster Shades"

cubre todos los 16 colores
de VITA® classical

No requiere estratificación
incrementos de hasta 4 mm

Estética excelente
pulido excepcional



MTA vpt

Preservación vital de la pulpa para la práctica diaria –
biocompatible y libre de monómeros

Una protección pulpar biocompatible, estable y resistente a bacterias es esencial para la preservación vital de la pulpa. Con MTA vpt, VOCO dispone de un material agregado de trióxido mineral (MTA) que está especialmente concebido para este propósito. Dentro del tratamiento de la pulpa vital (VPT) se puede usar MTA vpt para bases cavitarias, recubrimientos directos e indirectos así como para el tratamiento de la pulpa tras amputación vital (pulpotomía parcial o total).

En el marco del tratamiento de la caries también se puede recubrir, de manera segura, la dentina residual con MTA vpt.

MTA vpt libera iones de calcio y de hidróxido durante el fraguado, lo que estimula los procesos regenerativos propios del organismo y la formación de dentina terciaria. El alto valor pH resultante es conocido por su efecto bacteriostático y favorece la remineralización. De este modo, MTA vpt crea una barrera protectora estable y resistente a bacterias – la base óptima para mantener la vitalidad de la pulpa.

- MTA para la práctica diaria – biocompatible, libre de monómeros
- Alto valor pH (12) – conocido para un efecto bacteriostático
- Liberación de iones de calcio y de hidróxido – promueve a la formación de dentina terciaria y a la remineralización
- Protección pulpar segura – se mineraliza para un sellado resistente a bacterias
- Eficiente respecto a tiempo – inmediato procesamiento posterior mediante estratificación sin presión de tiempo
- Fácil manipulación – aplicación con instrumentos habituales o directamente desde la cápsula
- Ningunas decoloraciones del producto – libre de óxido de bismuto y compuestos que contienen hierro
- Radiopaco (290 % Al)



MTA vpt

Mezcla manual
10 grs. Polvo + 10 ml Líquido

REF 1645

MTA vpt AC

25 u. Cápsula de aplicación

REF 1646



El material MTA de precio atractivo para su práctica diaria

Cemento para base
cavitaria para todos los
materiales de restauración

Recubrimiento
pulpar indirecto

Recubrimiento
pulpar directo

Restauración de la pulpa
tras amputación vital





Invisible en el día a día – visible

Bifix Temp fluorescent

Material para fijaciones provisionales
y de curado dual a base de composite

Bifix Temp fluorescent, con su color translúcido similar al del diente natural, se añade armónicamente a la prótesis provisional. La estética permanece inalterada con la luz natural y, bajo luz ultravioleta A, la fluorescencia tampoco se transparenta en restauraciones colocadas provisionalmente. Bajo luz ultravioleta A, el material resulta fluorescente con gran intensidad, lo que facilita la detección y eliminación de los más pequeños restos de material tras la retirada de la prótesis provisional y contribuye a la colocación precisa de la consiguiente restauración definitiva. Ya solo con esta ventaja, el habitual proceso de acabado tan costoso se vuelve más eficiente.



Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix jeringa
+ accesorios

REF 1056

AlignerFlow LC

Composite fluorescente para ataches de alineadores

Los tratamientos con alineadores son una parte esencial del espectro de tratamientos odontológicos y ortodónticos. En muchos de ellos, los ataches juegan un papel clave. Estos deben presentar una gran estabilidad durante la duración del tratamiento y permitir una extracción segura y sin residuos al final del mismo. Con AlignerFlow LC, VOCO le ofrece un composite nano-híbrido con efecto de fluorescencia diseñado especialmente para estas necesidades. Bajo la luz ultravioleta A se puede realizar un control de los ataches, identificar con precisión cualquier residuo que deba ser retirado, o eliminarlo del esmalte con suavidad.



AlignerFlow LC

2 × 2 grs. jeringa A1

REF 1526

2 × 2 grs. jeringa A2


REF 1527

2 × 2 grs. jeringa A3

REF 1528

Las ventajas de un vistazo

- Aplicación precisa con una fluidez perfecta
- Fotopolimerización a través de un modelo transparente
- Estable y resistente a la abrasión durante todo el tiempo de uso

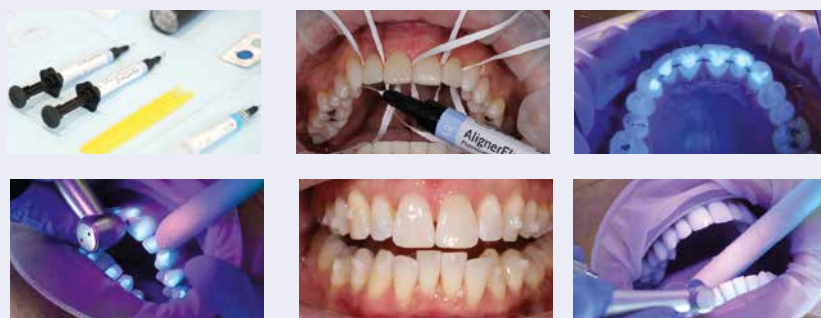

Fuente: Dra. Montse Galiano, Reino Unido



Clip F fluorescent

Material de restauración fotopolimerizable
para tratamientos provisionales

Clip F fluorescent convence por su versatilidad y facilidad de uso. Este material monocomponente resulta fácil de colocar y modelar. Mediante fotopolimerización, Clip F fluorescent pasa a ser resistente e impermeable a la saliva de inmediato. Las propiedades elásticas de Clip F fluorescent permiten en la mayoría de los casos una extracción sin residuos, con unos límites de preparación limpios y no deteriorados. Bajo luz ultravioleta A, la detección y eliminación de pequeños excesos y restos de material es más fácil. Especialmente en caso de los grosores de capa finos que no son detectables a simple vista. Clip F fluorescent es apropiado para todo tipo de obturaciones, sellados y restauraciones provisionales, incluida la técnica de inlay/onlay.



Clip F fluorescent

2 x 4 grs. jeringa

REF 1288

Rebilda DC fluorescent

El primer sistema fluorescente para la reconstrucción de muñones
y fijación de postes radiculares con fluorescencia activable

VOCO lanza, con el sistema de reconstrucción de muñones y fijación de postes radiculares de fraguado dual con base de composite, Rebilda DC fluorescent, un nuevo miembro de la familia Rebilda al mercado. Los preparados Rebilda llevan décadas establecidos con éxito en todo el mundo y gozan de una gran confianza en los consultorios odontológicos, especialmente gracias a sus propiedades similares a las de la dentina. Los colores anteriores dentina, blanco y azul se complementan ahora con una variante fluorescente, con la que VOCO vuelve a demostrar su carácter innovador.



Cartucho 50 grs.
dentina fluorescente,
+ accesorios

REF 1399

Jeringa QuickMix 10 grs.
dentina fluorescente,
+ accesorios

REF 1406

Es fluorescente

bajo luz ultravioleta A

Muy buena visibilidad de excesos y de los bordes de la reconstrucción, también en el área subgingival profunda

Manipulación simple

Tallable como dentina, consistencia fluida – adaptación perfecta

Estética excelente

Bajo luz natural tiene el color de dentina y es así óptimamente apropiado para restauraciones altamente estéticas

De curado dual

También para el uso en el conducto radicular para fijar postes radiculares (p.ej. Rebilda Post)

Profluorid Varnish + BioMin

Endurece significativamente el esmalte dental debilitado –
en cuatro sabores agradables

VOCO Profluorid Varnish, el barniz de fluoruro exitoso contiene el biovidrio BioMin. Este biovidrio invisible se disuelve en presencia de saliva y libera iones de calcio y fosfato que contribuyen a la remineralización del diente. En combinación con el fluoruro del Varnish, se forman en la superficie dental estructuras cristalinas que logran, p. ej., endurecer significativamente un esmalte dental debilitado.

¡Junto con la desensibilización conocida una verdadera doble protección!

Ahorre
hasta un
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Caramelo	REF 2276
Cereza	REF 2277
Menta	REF 2278
Bubble Gum	REF 2279

50 × 0,40 ml SingleDose

Caramelo	REF 2270
Cereza	REF 2271
Menta	REF 2272
Bubble Gum	REF 2273

10 ml Tubo

Caramelo	REF 2266
Cereza	REF 2267
Menta	REF 2268
Bubble Gum	REF 2269

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
Surtido: Caramelo, Cereza,
Menta, Bubble Gum
REF 2274



Profluorid Varnish

Barniz con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5 %)

La causa para la hipersensibilidad son por regla general los túbulos dentinales abiertos. La meta del tratamiento es, por eso, cerrarlos. Profluorid Varnish es un barniz con fluoruros para el tratamiento contra la hipersensibilidad. Después de preparaciones de cavidad o en caso de cuellos de dientes sensibles se sellan efectivamente los túbulos dentinales.

Las ventajas de un vistazo

- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (22.600 ppm fluoruro)
- Simple aplicación – tolerante a la humedad
- Disponible en siete sabores agradables
- Se aplica en capas finas y, por tanto, económico

Ahorre
hasta un
25%*

10 ml Tubo

Melón	REF 1267	Caramelo	REF 2232
Menta	REF 2234	Cereza	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Melón	REF 1271	Bubble Gum	REF 2239
Menta	REF 2231	Cereza	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Caramelo	REF 2229		

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tubo
Surtido: Menta, Melón,
Cereza y Caramelo
REF 2971



Futurabond U

En el práctico formato *SingleDose*

Detrás del Futurabond U está un proceso de desarrollo largo que ha perseguido una meta: ofrecerle un adhesivo universal al usuario que le proporcione unas ventajas exclusivas como también fiabilidad y que haga superfluo a cualquier otro Sistema de adhesión en el consultorio.

El Futurabond U sienta, por eso, nuevas bases referente a sus valores de adhesión y sobre todo en su aplicación flexible y de uso múltiple.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ accesorios

REF 1571

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ accesorios

REF 1572


Ahorre
hasta un
12 %*



Grandio blocs & Grandio disc

Material CAD / CAM de híbrido nanocerámico
para restauraciones de dientes individuales permanentes

Los Grandio blocs / Grandio disc convencer con sus propiedades físicas referente a elasticidad, resistencia y un alto contenido de relleno del 86% en peso. Por ello, el material es más similar al diente natural que todos los otros materiales para la restauración indirecta. Grandio blocs / Grandio disc es el material de elección y superior a las cerámicas convencionales. Los productos pueden ser trabajados sin problema de manera intraoral y pulidos a alto brillo.

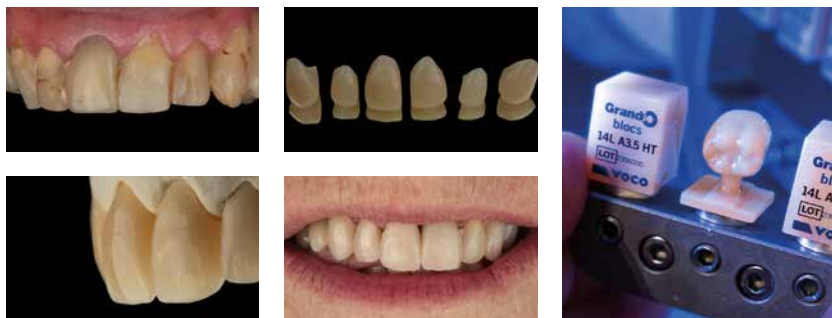

Fuente: Dr. Felipe Moura, Brasil

	Para el área de dientes anteriores							Para el área de dientes posteriores			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
no. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
no. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



NUEVO

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

Por ejemplo:

A2 REF 6249
A3 REF 6250

Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental

También
disponible para
Planmill®



Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

REF ver tabla


Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT

REF ver tabla

Bifix Veneer LC


Sencillamente seguro, sencillamente estético –
fijación de carillas con workflow optimizado

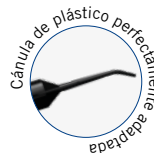

Bifix Veneer LC, el composite de fijación nanohíbrido fotopolimerizable, especialmente estético y con un peso de relleno del 81 % ha sido desarrollado específicamente para la fijación adhesiva sencilla y segura de carillas, inlays y onlays de composite o cerámica.

El concepto cromático claro con los **tres colores bright, clear y warm** simplifica la colocación de las carillas y permite influir positivamente en el resultado estético. Gracias a las pastas Try-in adaptadas con precisión resulta sencillo elegir el color adecuado y el resultado final puede ser comprobado previamente.

Un concepto cromático intuitivo y eficiente para un máximo éxito estético

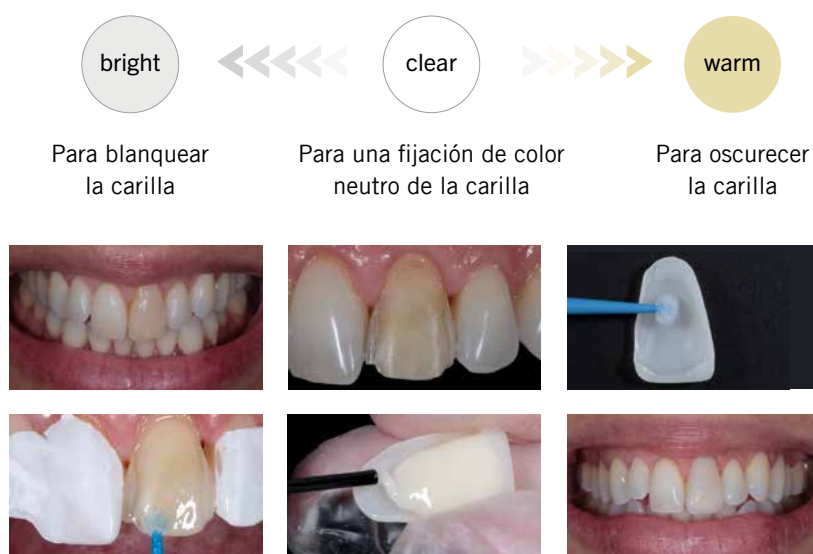


Fuente: Prof. Carlos Torres, Brasil

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las ofertas indicadas en las VOCO Highlights.

*Comparado con la compra individual

Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas. Salvo error u omisión. No nos hacemos responsables de los errores de imprenta.

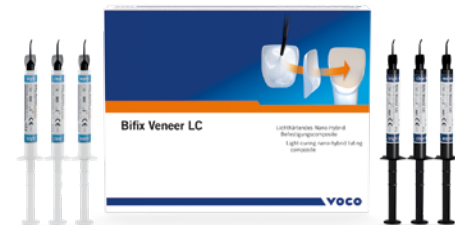

Bifix Veneer set

3 × 2 grs. jeringa Bifix Veneer LC
3 × 2,5 grs. jeringa Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ accesorios

REF 1428

Ahorre
hasta un
20%*

Bifix Veneer system set

3 × 2 grs. jeringa Bifix Veneer LC
3 × 2,5 grs. jeringa Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
2 ml jeringa Vococid
20 u. SingleDose Futurabond U
20 u. SingleDose Ceramic Bond
10 u. Sticky Tim
+ accesorios

REF 1429

Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Atención al cliente VOCO
Línea gratuita : 00 800 44 444 555
Fax: +49 4721-719-2931
service@voco.de

